



USER MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG

STANDARD Rollator Aluminium (foldable)

STANDARD Rollator Aluminium (faltbar)



x **DME**one



PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY TO ENSURE SAFE USAGE AND MAINTENANCE

INTRODUCTION

The DMEone Aluminium Foldable Rollator STANDARD is equipped with a seat, backrest and bag, and features a robust, foldable frame, adjustable handle height and adjustable seat height. It has 4 robust wheels for added stability and a lightweight frame for easy transport and manoeuvrability. The rollator is intended solely as a walking aid for people with restricted mobility. It is supposed to support people who have balance problems or other walking restrictions and is supposed to give them stability and security while walking.

INTENDED USE

The rollator is

- intended for private use.
- designed for indoor and outdoor use.
- NOT suitable for sand, gravel, very uneven terrain and very steep terrain.
- a medical product and conforms to the EU directive 2017/745 about medical devices. It is NOT a toy.
- only designed for persons up to 136 kg (300 lbs).

Use the rollator only as described in the instructions for use. Any other use is considered improper and can lead to material damage or even damage to persons. The manufacturer or dealer assumes no liability for damage caused by improper, incorrect use.

PLEASE NOTE:



This equipment must be installed by a competent person.

136 kg (300 lbs) weight limit. Do not exceed the weight limit stated.

Doing so could put the user at risk.

PART LIST

1 x frame	1 x bag
1 x backrest	4 x screws for frame
2 x rear wheels with handle bar	2 x screws for handle bar
2 x front wheels	2 x washers

BEFORE USE

1. Carefully remove all packaging. Avoid using any knives or other sharp instruments as this may damage the product / the surface of the product.
2. Check the product for any visible damage. If you notice any damage or suspect a fault, do not use the product, but contact your supplier immediately for support.
3. If all parts are okay, please dispose the packaging according to the local waste guidelines.

DELIVERY SCOPE OF STANDARD ROLLATOR



1. Frame with seat
2. Rear wheels with handles
3. Front wheels
4. Bag
5. Screws
6. Back rest

ASSEMBLING THE ROLLATOR

1. Take the frame (no. 1, picture above) and unfold it.
2. Take the front wheels (no. 3, picture above) and insert them at the front part of the frame (see fig. 1, no. 3). Ensure that the securing pin of the wheel frame pops out and secures the wheel on the frame.
3. Take the rear wheels and the handle bars (no. 2). Insert the tube section of the wheels into the bottom of the frame and the tube section of the handle bars into the top (fig. 1, no. 2). Please take care of the brake cable. Place it on the outside and clip it with the cable holder onto the frame and adjust the silver screw of the brake cable to activate the brake (fig. 2). Make sure the securing pin of the wheel tube pops out and secures the wheels.



4. Make sure the hole on the frame is aligned with the hole on the handle bar at the desired arm height. Insert one of the bolts (fig. 3) so that the bolt-head is pointing away from the rollator. Tighten the bolt. Repeat for the opposite side. For correct handle height see corresponding chapter.

fig. 2



fig. 3



fig. 4



5. Take the four screws that look the same and place them into the frame shortly above the wheels and fasten them (fig. 4).
6. Insert the back rest into the provided holes (fig. 5) until you here a „click“ sound. Now it is fixed.
7. Take the seat and lift it up. Now, take the bag and fasten it with the hook and loop fastener around the cross bars underneath the seat.

fig. 5



CORRECT HANDLE HEIGHT


Stand straight and close to the rollator. Let your arms hang loosely. Now grasp the handlebars of the rollator. If the arms are slightly bent, the height of the handles is adjusted correctly. If this is not the case, please adjust the height of the handlebars as described in the next paragraph.

HANDLE HEIGHT ADJUSTMENT

The height level of the handles can be adjusted to different heights.

1. Please loosen the screw (fig. 6) which fastens the handle bar.
2. Push down or pull up the handle to the height you need.
3. Make sure the hole on the frame is aligned with the hole on the handle bar. Insert the bolt back into the hole and tighten.
4. Repeat the process for the second handle.

fig. 6

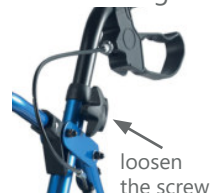

NOTE: The handles are set at the correct height when the handles are at the crease of your wrist while your arms hang loosely.

SEAT HEIGHT ADJUSTMENT

The seat height can be adjusted to the users size. It is at the correct height when the user sits on the seat and the upper and the lower leg form a 90° angle.

fig. 7



fig. 8



1. Please loosen the screws above the wheels (fig. 7).
2. Press the securing pin (fig. 8) and push or pull the tube of the castor until the securing pin adjusts to the next height.
3. Repeat step 2 until the desired height is reached. Make sure the securing pin pops out completely.
4. Repeat the above listed steps for the other 3 wheels.
5. If the desired height is adjusted, insert all screws and fasten them!

FOLDING THE ROLLATOR

To fold the rollator, remove the bag, than flip the locking mechanism and press the legs of the rollator together.



DANGER OF INJURY!

Keep hands away from the side braces when folding the rollator.

USING THE ROLLATOR

GENERAL INFORMATION ON USING THE ROLLATOR

It is essential to observe the following information on using the rollator. These instructions, the safety instructions and the intended use must be strictly observed for safe use!

**DANGER OF INJURY!**

- Check the condition of the rollator regularly. DO NOT use the rollator, if you notice any external damage.
- Always check that all screws are tight before using the rollator.
- Before using the rollator always check that the brakes are working properly.
- The rollator is a walking aid. Only use the rollator to be safe while walking. DO NOT use the rollator as a wheelchair or similar.
- Rain, moisture and dirt can affect the rollator's braking performance negatively.
- Avoid unsuitable surfaces and paths. Do not drive the rollator over gravel, sand or similar, uneven surfaces.
- On sloping paths, the rolling speed of the rollator can be higher than your walking speed. There is a risk of falling! Brake sufficiently and walk carefully.

WALKING CORRECTLY WITH THE ROLLATOR**DANGER OF INJURY!**

- The rollator must always be held close to the body while walking so that it provides good support and enables safe walking. If the rollator is too far away from the body while walking, it can easily roll away. The same is true if you walk too bent over. Danger of falling!
- When walking, support yourself on the rollator and stabilize your walking.
- Always walk upright and keep your eyes straight ahead.
- Only use the rollator if the handle height is adjusted correctly for your height (see CORRECT HANDLE HEIGHT).

USING THE BRAKES

Using the brakes while walking:

To reduce your walking speed, pull both handbrake levers towards the handle. Pull harder for greater braking effect. To reduce the braking effect, carefully release the handbrake lever.

Locking the brakes:

Press down on both handbrake levers until they click and stay in the down position. The brakes are now locked.

**DANGER OF INJURY!**

When stopping, parking and especially when you want to sit down on the rollator always lock both brakes! Check if both brakes are still locked before you get

up from the rollator in order to allow you to get up safely.

Untighten the parking brake:

Pull the handbrake levers up until they release and stop in the neutral position. The brakes are now released.

NOTE: The brakes on the rollator are factory set and should not require adjustment. If you think, the brakes are no longer working correctly, please contact your local dealer for technical assistance.

GETTING OVER OBSTACLES



DANGER OF INJURY!

- Hold the rollator firmly when getting over obstacles.
- Be especially careful when walking down curbs!
- Do not use the rollator on stairs!
- Do not tilt the rollator more than 5 degrees to the side. Risk of falling!

USING THE SEAT CORRECTLY



DANGER OF INJURY!

- Only sit on the rollator when both parking brakes are activated and the rollator is on a level surface!
- DO NOT allow yourself to be pushed when you are sitting on the rollator and do not push any other person sitting on the rollator. Danger of falling!
- Do not sit on the rollator if the surface is very smooth and slippery. The rollator can slip away even though the parking brake is activated.
- Only one person is allowed to sit on the seat at a time. Please pay attention to the maximum load capacity of the rollator!
- Always sit in the middle of the seat and make sure that both feet touch the floor!

CLEANING

Clean the rollator with a soft, damp cleaning rag and, if necessary, with a little mild detergent. Then dry the rollator well. Let the rollator dry for a while after cleaning so that hard-to-reach areas can dry thoroughly. In particular, the wheels, handles, and braking devices must be completely dry before using the rollator again.



DANGER OF DAMAGE!

Never use organic solvents and / or abrasive cleaner.

CARE & MAINTENANCE

Check the functionality of the rollator before each use. In particular, check the following points:

- The brakes are in perfect working order and the brake cables are free of deformations and tears.
- The wheels are in perfect working order. All wheels can be rotated properly and the front wheels can be pivoted. The tires do not show any significant signs of wear.
- All screw connections are tight.
- The entire rollator is free of damage, cracks and coarse soiling.



DANGER OF INJURY!

DO NOT use the rollator if the functionality of the rollator is not guaranteed or only guaranteed to a limited extent. Even minor damage or soiling (e.g. on the brakes of the rollator) can lead to injuries and accidents.

STORAGE



DANGER OF INJURY!

If you are not going to use the rollator for a longer period of time, secure the rollator with the parking brake against rolling away and only park the rollator where no one can fall over it.

- If the rollator is not going to be used for a longer period of time, clean it before you put it away (see CLEANING).
- Store the rollator in a dry and well-ventilated place.
- Protect the rollator from frost and direct sunlight.
- Keep the rollator out of the reach of children.

**DANGER OF DAMAGE!**

Never leave the rollator outside for a long period of time and do not expose the rollator to bad weather conditions. This can cause damage to the rollator.

TRANSPORTATION

Fold the rollator for transport (see FOLDING THE ROLLATOR). Make sure that the rollator is properly secured during transport. If necessary, take additional precautions to secure transport.

SECURITY ADVICE

Danger for children and people with reduced physical, sensory or mental abilities (e.g. partially handicapped people, elderly people with limited physical and mental abilities) or absence of experience and knowledge (e.g. children).

- People with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience and knowledge may only use the rollator under supervision, or have been instructed in its safe use and have understood the dangers that can arise when using the rollator.
- Keep children away from the rollator. Children could tip over with the rollator and injure themselves.

**DANGER OF INJURY!**

Improper handling of the rollator can lead to serious injuries. It is essential to pay attention to the following information:

- DO NOT use the rollator if you are under the influence of substances that affect your mental and physical performance (e.g. strong medication or alcohol).
- DO NOT use the rollator on gravel, sand or similar unstable and uneven surfaces.
- DO NOT use the rollator on steep inclines.
- NEVER use the rollator on stairs, escalators or moving walkways.
- Use caution when operating rollator on wet, slippery or icy surfaces (e.g. ice and snow). It is best to NOT use the rollator on such surfaces.
- DO NOT walk with the rollator in the dark or in poor visibility conditions.
- Avoid driving the rollator over manhole covers, gratings, pans in the ground and the like. The tires could get caught in the bumps.
- Only walk with the rollator on the sidewalk. Use the roadway / street only for crossing.

- Never exceed the maximum load capacity of the rollator. The maximum user weight for the rollator is 136 kg.
- Never use the rollator as a wheelchair or as a means of transportation for people. This means: Do not push the rollator when someone is sitting on the rollator.
- DO NOT hang any bags on the rollator, except for the bag included in the delivery scope.
- DO NOT make any changes to the rollator, especially NOT to the moving parts of the rollator. If anything is changed, safe use is no longer guaranteed. You could injure yourself.
- Be sure to set both parking brakes before sitting on or setting down the rollator. The rollator is only suitable for short-term sitting and is by no means intended as a chair for permanent sitting. Before you get up from the rollator again, check that both parking brakes are still set. Only then get up.
- NEVER stand on the rollator. Never use the rollator as a climbing aid or as a ladder!

RISK OF BURNING!

Do not expose the rollator to direct sunlight or similar heat sources. Do not place the rollator in front of an open fire. Individual parts of the rollator can get very hot.

RISK OF DAMAGE!

Protect the rollator from permanent direct sunlight and other heat sources, as parts of the rollator can fade and become damaged over time.

CAUTION

Do not use this product without proper instruction from a healthcare professional.

- This product has a patient weight limitation of 136 kg.
- DMEone assumes no liability for any damage or injury caused by improper installation of this product.
- If components are missing or damaged, DO NOT USE. Contact your dealer immediately.
- Ensure all parts and components are tightened before use.
- Inspect rollator weekly for proper function and wear. If any component is not working or is worn, please contact your dealer immediately for replacement parts.
- If any serious incident occurs with the device it should be reported to the manufacturer and local authorized dealer.

WARRANTY

To improve the safety and lifespan of your walker rollator, it is recommended that you have it serviced on a regular basis. There is a comprehensive twelve-month warranty from the date on which your new walker rollator is delivered. The warranty covers the walker for repairs or replacement during this period. For more detail, please see the warranty conditions below:

1. Any work or replacement part installation must be carried out by an authorised dealer / service agent.
2. To apply the warranty should your walker rollator require attention please contact the outlet from which you purchased the walker.
3. Should any part of the walker rollator require repair or full or part replacement, as a result of a manufacturing or material defect within the warranty period, parts will be supplied free of charge. Note: The guarantee is not transferable.
4. Any repaired or replaced parts will be covered by the balance of the warranty period on the walker.
5. Parts replaced after the original warranty has expired will be covered by a three month warranty.
6. Consumable items supplied will not generally be covered during the normal warranty period unless such items require repair or replacement clearly as a direct result of a manufacturing or material defect. Such items include (among others): upholstery and tyres.
7. The above warranty conditions apply to brand new walkers. For whether your walker rollator is covered contact your dealer.
8. Under normal circumstances, no responsibility will be accepted where the walker rollator has required assistance as a direct result of:
 - a. the walker rollator part not having been maintained in accordance with the manufacturers recommendations.
 - b. failure to use the manufacturer's specified parts.
 - c. the walker rollator part having been damaged due to neglect, accident or improper use.
 - d. the walker rollator part having been altered from the manufacturer's specification or repairs having been attempted before the dealer is notified.

The manufacturer reserves the right to alter without notice any weights, measurements or other technical data shown in this manual. All figures, measurements and capacities shown in this manual are approximate and do not constitute specifications.

BITTE LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR EINE SICHERE VERWENDUNG UND WARTUNG SORGFÄLTIG DURCH

Der DMEone Aluminium-Faltrollator STANDARD ist mit einem Sitz, einer Rückenlehne und einer Tasche ausgestattet und verfügt über einen robusten, faltbaren Rahmen und höhenverstellbare Handgriffe. Außerdem kann die Sitzhöhe angepasst werden. Der Rollator hat 4 leichtgängige, robuste Räder und einen leichten Rahmen, der einen einfachen Transport und gute Manövrierfähigkeit ermöglicht. Der von Ihnen erworbene Rollator ist ausschließlich als Gehhilfe für Menschen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit vorgesehen. Er soll Menschen, die Gleichgewichtsprobleme haben oder andere Einschränkungen beim Gehen vorweisen, unterstützen und Ihnen Halt und Sicherheit beim Laufen geben.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Der Rollator ist

- nur für den privaten Gebrauch gedacht.
- sowohl für den Gebrauch in Innenräumen, als auch draußen vorgesehen.
- NICHT geeignet für Sand, Kies, sehr unebenes Gelände, sowie sehr steiles Gelände.
- ein Medizinprodukt und konform mit der EU Richtlinie 2017/745 über Medizinprodukte. Er ist KEIN Spielzeug.
- nur für den Gebrauch durch Personen mit einem Gewicht von max. 136 kg (300 lbs) bestimmt.

Verwenden Sie den Rollator nur wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen, falschen Gebrauch entstehen.

BITTE BEACHTEN SIE:



Dieses Gerät muss von einer sachkundigen Person installiert werden. Gewichtsbeschränkung: 136 kg (300 lbs). Überschreiten Sie die angegebenen Gewichtsgrenze nicht! Dies könnte den Benutzer gefährden.

LIEFERUMFANG

1 x Rahmen	1 x Tasche
1 x Rückenlehne	2 x Schrauben für die Handgriffe
2 x Hinterräder mit Handgriffen	2 x Unterlegscheiben
2 x Vorderräder	4 x Schrauben für den Rahmen

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

1. Entfernen Sie vorsichtig das Verpackungsmaterial. Verzichten Sie dabei auf den Einsatz von Messern oder anderen scharfen Gegenständen, um die Oberfläche der Teile nicht zu beschädigen.
2. Nachdem Sie das Produkt ausgepackt haben, prüfen Sie bitte, ob der Lieferumfang vollständig ist und ob der Rollator und/ oder die Zubehörteile Schäden aufweisen. Sollten Ihnen Schäden auffallen, verwenden Sie den Rollator nicht. Kontaktieren Sie in dem Fall bitte Ihren Händler bzw. den angegebenen Kundendienst.
3. Wenn alle Teile in Ordnung sind, entsorgen Sie das Verpackungsmaterial nach den örtlichen Entsorgungsrichtlinien.

HAUPTKOMPONENTEN DES STANDERD ROLLATORS

1. Rahmen mit Sitz
2. Hinterräder mit Griffen
3. Vorderräder
4. Tasche
5. Schrauben
6. Rückenlehne

AUFBAUEN DES ROLLATORS

1. Nehmen Sie den Rahmen (Nr. 1, Bild oben) und klappen Sie ihn auseinander.
2. Nehmen Sie die Vorderräder (Nr. 3, Bild oben) und setzen Sie diese am Vorderende des Rahmens ein (Abb. 1, Nr. 3). Stellen Sie sicher, dass der Sicherungsstift des Radrahmens herauspringt und so das Rad im Fahrradrahmen sichert.

3. Nehmen Sie die Hinterräder und die Handgriffe (Nr. 2, Bild oben) und setzen Sie die Rohrabschnitte der Räder unten und die Handgriffe oben in den Fahrradrahmen ein (Abb. 1, Nr. 2). Achten Sie auf das Bremskabel! Legen Sie das Bremskabel nach außen und befestigen Sie es mit dem Kabelhalter am Rahmen (Abb. 2). Justieren Sie auch die silberne Schraube am Bremskabel, um die Bremse zu aktivieren. Achten Sie darauf, dass der Sicherheitsstift des Radrahmens herauspringt und so das Rad im Fahrradrahmen sichert.

Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4



4. Stellen Sie sicher, dass das Loch am Handgriff mit dem Loch am Fahrradrahmen übereinstimmt. Fügen Sie die Schraube von außen ein, sodass der Kopf der Schraube vom Rollator weg zeigt (Abb. 3). Drehen Sie die Schraube fest. Wiederholen Sie den Vorgang für den zweiten Handgriff. Wie Sie die Handgriffe auf die richtige Höhe für den Nutzer einstellen, finden Sie im dazugehörigen Kapitel auf der nächsten Seite.
5. Nehmen Sie die vier Schrauben, die gleich aussehen und fügen Sie sie oberhalb der Räder im Fahrradrahmen ein (Abb. 4). Drehen Sie sie fest.
6. Stecken Sie die Rückenlehne in die dafür vorgesehenen Löcher (Abb. 5) bis es „klick“ macht. Die Rückenlehne ist nun fest.
7. Klappen Sie die Sitzfläche nach oben. Nehmen Sie nun die Tasche und machen Sie sie mit den Klettverschlüssen am Rahmen fest.

Abb. 5



KORREKTE HANDGRIFFHÖHE

Stehen Sie gerade und nah am Rollator. Lassen Sie die Arme locker hängen. Umfassen Sie nun die Handgriffe des Rollators. Die Arme sollten leicht gebeugt sein, dann ist die Höhe der Handgriffe richtig eingestellt. Ist dies nicht der Fall, verstellen Sie bitte die Höhe der Handgriffe entsprechend, wie im nächsten Abschnitt beschrieben.

EINSTELLEN DER HANDGRIFFHÖHE

Die Höhe der Handgriffe lässt sich an unterschiedliche Benutzergrößen anpassen.

1. Lösen Sie die Schraube des Handgriffs am Fahrradrahmen (Abb. 6).
2. Drücken Sie den Handgriff herunter oder ziehen Sie ihn nach oben bis die gewünschte Höhe erreicht ist.
3. Stellen Sie sicher, dass das Loch am Handgriff mit dem Loch am Fahrradrahmen übereinstimmt. Schrauben Sie den Griff wieder fest.
4. Wiederholen Sie den Vorgang für den zweiten Griff.



HINWEIS: Die Griffe sind auf die richtige Höhe eingestellt, wenn sie sich bei locker hängenden Armen auf der Höhe Ihres Handgelenks befinden.

SITZHÖHENVERSTELLUNG

Die Sitzhöhe kann an die Größe des Benutzers angepasst werden. Der Sitz hat die richtige Höhe, wenn der Benutzer auf dem Sitz sitzt und die Ober- und Unterschenkel einen 90° - Winkel bilden.

Abb. 7



Abb. 8



1. Lösen Sie die Schrauben über den Rädern (Abb. 7).
2. Drücken Sie den Sicherungsstift herein und schieben oder ziehen Sie das Rohr des Vorderrads, bis sich der Sicherungsstift auf der nächsten Höhe arretiert.

3. Wiederholen Sie Schritt 2, bis die gewünschte Höhe erreicht ist. Stellen Sie sicher, dass der Sicherungsstift vollständig herauspringt.
4. Wiederholen Sie die vorherigen Schritte für die anderen 3 Räder.
5. Ist die gewünschte Höhe eingestellt, alle Schrauben wieder einsetzen und festziehen!

FALTEN DES ROLLATORS

Um den Rollator zusammenzuklappen, nehmen Sie die Tasche ab, lösen Sie den Verriegelungsmechanismus und drücken Sie die Beine des Rollators zusammen.



VERLETZUNGSGEFAHR!

Halten Sie beim Zusammenklappen des Rollators Ihre Hände von den Seitenstreben fern. Sie könnten sich ihre Hände klemmen.

NUTZUNG DES ROLLATORS

GENERELLE INFORMATIONEN ZUR NUTZUNG DES ROLLATORS

Beachten Sie unbedingt die folgenden Hinweise zur Nutzung des Rollators. Für eine sichere Verwendung sind diese Anleitung, die Sicherheitshinweise und das Kapitel über den bestimmungsgemäßen Gebrauch unbedingt zu beachten!



VERLETZUNGSGEFAHR!

- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Rollators. Benutzen Sie den Rollator NICHT, wenn Sie äußere Schäden bemerken.
- Überprüfen Sie immer, ob alle Schrauben fest angezogen sind, bevor Sie den Rollator verwenden.
- Prüfen Sie stets, ob die Bremsen ordnungsgemäß funktionieren, bevor Sie den Rollator benutzen.
- Der Rollator ist eine Gehhilfe. Benutzen Sie den Rollator nur, um beim Gehen sicher zu sein. Benutzen Sie den Rollator NICHT als Rollstuhl oder Ähnliches.
- Regen, Feuchtigkeit und Schmutz können die Bremsleistung des Rollators negativ beeinflussen.
- Vermeiden Sie ungeeignete Untergründe und Wege. Fahren Sie mit dem Rollator nicht über Kies, Sand oder ähnliche, unebene Untergründe.
- Auf abschüssigen Wegen kann die Rollgeschwindigkeit des Rollators höher sein als Ihre Gehgeschwindigkeit. Es besteht Sturzgefahr! Bremsen Sie ausreichend und gehen Sie vorsichtig.

RICHTIGES GEHEN MIT DEM ROLLATOR



VERLETZUNGSGEFAHR!

- Der Rollator muss beim Gehen immer nah am Körper gehalten werden, damit er guten Halt bietet und ein sicheres Gehen ermöglicht. Wenn der Rollator beim Gehen zu weit vom Körper entfernt ist, kann er leicht wegrollen. Das Gleiche gilt, wenn Sie zu gebeugt gehen. Sturzgefahr!
- Stützen Sie sich beim Gehen auf den Rollator und stabilisieren Sie Ihren Gang.
- Gehen Sie immer aufrecht und richten Sie den Blick geradeaus.
- Benutzen Sie den Rollator nur, wenn die Griffhöhe korrekt auf Ihre Körpergröße eingestellt ist (siehe KORREKTE HANDGRIFFHÖHE).

NUTZUNG DER BREMSEN

Nutzung der Bremsen während des Gehens:

Um Ihre Gehgeschwindigkeit zu reduzieren, ziehen Sie beide Handbremshebel zum Griff. Stärker ziehen, um eine stärkere Bremswirkung zu erzielen. Um die Bremswirkung zu verringern, lösen Sie vorsichtig den Handbremshebel.

Bremsen feststellen:

Drücken Sie beide Handbremshebel nach unten, bis sie einrasten und in der unteren Position bleiben. Die Bremsen sind jetzt blockiert.



VERLETZUNGSGEFAHR!

Beim Anhalten, Parken und insbesondere wenn Sie sich auf den Rollator setzen möchten, stellen Sie immer beide Bremsen fest! Überprüfen Sie vor dem Aufstehen vom Rollator, ob beide Bremsen noch blockiert sind, um ein sicheres Aufstehen zu ermöglichen.

Festgestellte Bremsen lösen:

Ziehen Sie die Handbremshebel nach oben, bis sie sich lösen und in der Neutralstellung anhalten. Die Bremsen sind nun gelöst.

HINWEIS: Die Bremsen am Rollator sind werkseitig eingestellt und sollten nicht angepasst werden müssen. Wenn Sie glauben, dass die Bremsen nicht mehr richtig funktionieren, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort, um technische Hilfe zu erhalten.

HINDERNISSE ÜBERWINDEN



VERLETZUNGSGEFAHR!

- Halten Sie den Rollator beim Überwinden von Hindernissen gut fest.
- Seien Sie beim Begehen von Bordsteinkanten besonders vorsichtig!
- Benutzen Sie den Rollator nicht auf Treppen!
- Neigen Sie den Rollator nicht mehr als 5 Grad zur Seite. Sturzgefahr!

KORREKTE NUTZUNG DER SITZFLÄCHE



VERLETZUNGSGEFAHR!

- Setzen Sie sich nur auf den Rollator, wenn beide Feststellbremsen aktiviert sind und der Rollator auf einer ebenen Fläche steht!
- Lassen Sie sich NICHT schieben, während Sie auf dem Rollator sitzen, und schieben Sie keine andere Person, die auf dem Rollator sitzt. Sturzgefahr!
- Setzen Sie sich nicht auf den Rollator, wenn der Untergrund sehr glatt und rutschig ist. Der Rollator kann trotz aktivierter Feststellbremse wegrutschen.
- Es darf jeweils nur eine Person auf dem Sitz sitzen. Bitte achten Sie auf die maximale Belastbarkeit des Rollators!
- Setzen Sie sich immer in die Sitzmitte und achten Sie darauf, dass beide Füße den Boden berühren!

REINIGUNG

Reinigen Sie den Rollator mit einem weichen, feuchten Putzlappen und bei Bedarf mit etwas mildem Reinigungsmittel. Trocknen Sie den Rollator anschließend gut ab. Lassen Sie den Rollator nach der Reinigung eine Weile trocknen, damit schwer zugängliche Stellen gründlich trocknen können. Insbesondere die Räder, Griffe und Bremsvorrichtungen müssen vor der erneuten Nutzung des Rollators vollständig trocken sein.



GEFAHR DER BESCHÄDIGUNG!

Verwenden Sie niemals organische Lösungsmittel und/oder Scheuermittel.

PFLEGE UND WARTUNG

Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Funktionsfähigkeit des Rollators. Überprüfen Sie insbesondere folgende Punkte:

- Die Bremsen sind in einwandfreiem Zustand und die Bremszüge sind frei von Verformungen und Rissen.
- Die Räder sind in einwandfreiem Zustand. Alle Räder sind einwandfrei drehbar und die Vorderräder sind schwenkbar. Die Reifen weisen keine nennenswerten Gebrauchsspuren auf.
- Alle Schraubverbindungen sind fest angezogen.
- Der gesamte Rollator ist frei von Beschädigungen, Rissen und groben Verschmutzungen.

VERLETZUNGSGEFAHR!



Benutzen Sie den Rollator **NICHT**, wenn die Funktionalität des Rollators nicht oder nur eingeschränkt gewährleistet ist. Bereits geringfügige Beschädigungen oder Verschmutzungen (z. B. an den Bremsen des Rollators) können zu Verletzungen und Unfällen führen.

LAGERUNG



VERLETZUNGSGEFAHR!

Wenn Sie den Rollator längere Zeit nicht benutzen, sichern Sie den Rollator mit der Feststellbremse gegen Wegrollen und stellen Sie den Rollator nur dort ab, wo niemand darüber stürzen kann.

- Wenn Sie den Rollator längere Zeit nicht benutzen, reinigen Sie ihn, bevor Sie ihn wegräumen (siehe REINIGUNG).
- Lagern Sie den Rollator an einem trockenen und gut belüfteten Ort.
- Schützen Sie den Rollator vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung.
- Bewahren Sie den Rollator außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

GEFAHR DER BESCHÄDIGUNG!



Lassen Sie den Rollator niemals längere Zeit im Freien stehen und setzen Sie den Rollator keinen schlechten Witterungsbedingungen aus. Dies kann zu Schäden am Rollator führen.

TRANSPORT

Klappen Sie den Rollator für den Transport zusammen (siehe FALTEN DES ROLLATORS). Achten Sie darauf, dass der Rollator beim Transport ordnungsgemäß gesichert ist. Treffen Sie ggf. zusätzliche Vorkehrungen zur Transportsicherung.

SICHERHEITSHINWEIS



Gefahr für Kinder und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten (z. B. teilweise behinderte Menschen, ältere Menschen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (z. B. Kinder).

- Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen dürfen den Rollator nur unter Aufsicht nutzen oder wenn sie in den sicheren Gebrauch eingewiesen wurden und die Gefahren verstanden haben, die beim Gebrauch des Rollators entstehen können.
- Halten Sie Kinder vom Rollator fern. Kinder könnten mit dem Rollator umkippen und sich verletzen.



VERLETZUNGSGEFAHR!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Rollator kann zu schweren Verletzungen führen. Auf folgende Informationen ist unbedingt zu achten:

- Benutzen Sie den Rollator NICHT, wenn Sie unter dem Einfluss von Substanzen stehen, die Ihre geistige und körperliche Leistungsfähigkeit beeinträchtigen (z. B. starke Medikamente oder Alkohol).
- Benutzen Sie den Rollator NICHT auf Kies, Sand oder ähnlichen instabilen und unebenen Oberflächen.
- Benutzen Sie den Rollator NICHT auf steilen Steigungen / Neigungen.
- Benutzen Sie den Rollator NIEMALS auf Treppen, Rolltreppen oder Rollsteigen.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Rollator auf nassen, rutschigen oder glatten Oberflächen (z. B. Eis und Schnee) betreiben. Es ist am besten, den Rollator NICHT auf solchen Oberflächen zu verwenden.
- Nutzen Sie den Rollator nicht im Dunkeln oder bei schlechten Sichtverhältnissen.
- Vermeiden Sie es, mit dem Rollator über Schachtdeckel, Gitter und dergleichen zu fahren. Die Reifen könnten sich in den Unebenheiten verfangen.
- Gehen Sie mit dem Rollator nur auf dem Gehweg. Benutzen Sie die Fahrbahn / Straße nur zum Überqueren.
- Überschreiten Sie niemals die maximale Tragfähigkeit des Rollators. Das maximale Benutzergewicht beträgt 136 kg.

- Benutzen Sie den Rollator niemals als Rollstuhl oder als Transportmittel für Personen. Das bedeutet: Schieben Sie den Rollator nicht, wenn jemand auf dem Rollator sitzt.
- Hängen Sie KEINE Taschen an den Rollator, außer die mitgelieferte Tasche.
- Nehmen Sie KEINE Veränderungen am Rollator vor, insbesondere NICHT an den beweglichen Teilen des Rollators. Bei Änderungen ist die sichere Nutzung nicht mehr gewährleistet. Sie könnten sich verletzen.
- Stellen Sie sicher, dass beide Feststellbremsen angezogen sind, bevor Sie sich auf den Rollator setzen oder ihn abstellen. Der Rollator ist nur für kurzzeitiges Sitzen geeignet und keinesfalls als Stuhl für dauerhaftes Sitzen gedacht. Bevor Sie wieder vom Rollator aufstehen, prüfen Sie, ob beide Feststellbremsen noch angezogen sind. Stehen Sie erst dann auf.
- Stellen Sie sich NIEMALS auf den Rollator. Benutzen Sie den Rollator niemals als Aufstieghilfe oder als Leiter!

VERBRENNUNGSGEFAHR!



Setzen Sie den Rollator keiner dauerhaften direkten Sonneneinstrahlung oder ähnlichen Wärmequellen aus. Stellen Sie den Rollator nicht vor offenem Feuer ab. Einzelne Teile des Rollators können sehr heiß werden.

GEFAHR DER BESCHÄDIGUNG!



Schützen Sie den Rollator vor dauerhafter direkter Sonneneinstrahlung und anderen Wärmequellen, da Teile des Rollators mit der Zeit ausbleichen und beschädigt werden können.

VORSICHT



Verwenden Sie dieses Produkt nicht ohne ordnungsgemäße Unterweisung durch medizinisches Fachpersonal.







- Dieses Produkt hat eine Gewichtsbeschränkung von 136 kg für Patienten.
- DMEone übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Installation dieses Produkts verursacht werden.
- Wenn Komponenten fehlen oder beschädigt sind, den Rollator NICHT VERWENDEN. Kontaktieren Sie umgehend Ihren Händler!
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile und Komponenten vor der Verwendung festgezogen sind.
- Überprüfen Sie den Rollator wöchentlich auf ordnungsgemäße Funktion und Verschleiß. Wenn eine Komponente nicht funktioniert oder abgenutzt ist, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Händler, um Ersatzteile zu erhalten.
- Wenn ein ernsthafter Zwischenfall mit dem Gerät auftritt, sollte dies dem Hersteller und dem örtlichen autorisierten Händler sofort mitgeteilt werden.

GARANTIE

Um die Sicherheit und Lebensdauer Ihres Rollators zu verbessern, wird empfohlen, dass Sie ihn regelmäßig auf Beschädigungen überprüfen. Ab Kaufdatum gibt es eine umfassende zwölfmonatige Garantie. Die Garantie deckt die Kosten für Reparaturen bzw. Ersatz während dieser Zeit. Weitere Einzelheiten finden Sie in den nachstehenden Garantiebedingungen:

1. Alle Arbeiten oder der Einbau von Ersatzteilen müssen von einem autorisierten Händler vorgenommen werden.
2. Um die Garantie geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an die Verkaufsstelle, bei der Sie den Rollator gekauft haben.
3. Sollte ein Teil des Rollators repariert oder vollständig oder teilweise ausgetauscht werden müssen, infolge eines Herstellungs- oder Materialfehlers innerhalb der Garantiezeit, werden die Teile kostenlos nachgeliefert. Hinweis: Die Garantie ist nicht übertragbar.
4. Alle reparierten oder ersetzten Teile werden durch den Rest der Garantiezeit abgedeckt.
5. Für Teile, die nach Ablauf der ursprünglichen Garantie ersetzt wurden, gilt eine Garantiefrist von drei Monaten.
6. Gelieferte Verbrauchsartikel sind während der normalen Gewährleistungsfrist im Allgemeinen nicht abgedeckt, hierzu gehören Polsterung und Reifen.
7. Die vorstehenden Garantiebedingungen gelten für fabrikneue Gehhilfen.
8. Unter normalen Umständen wird keine Verantwortung übernommen, wenn der Rollator eine Reparatur benötigt als direkte Folge von:
 - a. Teile des Gehwagens wurden nicht gemäß den Herstellerangaben gewartet.
 - b. Nichtverwendung der vom Hersteller angegebenen Teile.
 - c. Beschädigungen am Rollator oder Teilen des Rollators, die aufgrund von Nachlässigkeit, Unfall oder unsachgemäßem Gebrauch entstanden sind.
 - d. Änderungen, die am Rollator vorgenommen wurden, also die Herstellerspezifikation geändert wurden.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Gewichte, Maße oder Angaben ohne Vorankündigung zu ändern. Alle in diesem Handbuch angegebenen Zahlen, Maße und Kapazitäten stellen keine Spezifikationen dar.

	Manufacturer Hersteller	Zhongshan Qunn Medical Equipment Co., Ltd No. 108 Zhaoyi Road, Dongsheng Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China
	Date of Manufacturer Produktionsdatum	
	Consult the Instructions for Use Gebrauchsanweisung beachten	
	Medical Device Medizinprodukt	
	EU Authorized Representative Europäischer Bevollmächtigter	Luxus Lebenswelt GmbH Kochstr.1, 47877 Willich, Germany info.m@luxuslw.de
	Importer Importeur	DMEone GmbH Lütke Haar 13, 59602 Rülthen, Germany info@dmeone.de



CUSTOMER SERVICE / KUNDENSERVICE



+49 2952 / 970 958 - 90

info@dmeone.de • www.dmeone.de



Lütke Haar 13 | 59602 Rüthen
www.dmeone.de